

WebReq

Vejledning for WebQuality i WebReq



Indholdsfortegnelse

Forord.....	2
1. Åbning af WebQuality	3
2. Bestilling af analyser til WebQuality	4
3. Indsendelse af kontrolmateriale	5
4. Reminder for WebQuality	5
5. Kontakt os	6

Forord

Modulet WebQuality, anvendes ved kvalitetssikring på analyser udført i almen lægepraksis. Det er de såkaldte parallelanalyser. Parallelanalyse vil sige, at både praksis og laboratoriet måler samme egenskab, på en samtidig udtaget prøve, så der fremkommer to resultater for samme egenskab, som kan sammenholdes.

WebQuality er baseret på specialudviklede promptspørgsmål, hvor egne måleresultater indtastes.

Modulet WebQuality kræver ikke speciel oplæring, dog skal laboratoriet lave nogle tilretninger og tildele klinikken et fiktivt CPR-nummer, som kun må benyttes i WebQuality.

1. Åbning af WebQuality



PATIENT DATA

Der er brug for følgende oplysninger om patienten, før der kan oprettes en rekvisition.

CPR-nummer:

Fornavn:

Efternavn:

Adresse:

Postnummer:

By:


Telefonnummer:

Mobil / SMS:

Email:

Region:

Sygesikringsgruppe:

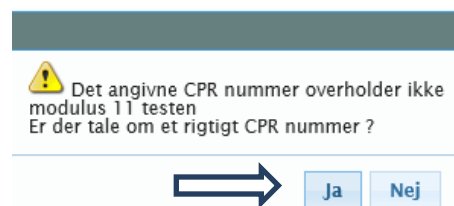

WebReq åbnes direkte fra lægesystemet med det fiktive CPR-nummer fra laboratoriet.

Er der problemer med at oprette "patienten" i lægesystemet, åbnes WebReq i stedet med testperson Nancy Berggren (251248-9996). Du klikker på "**Ny rekvisition**" i funktionsbjælken, nederst i skærbilledet.



Indtast det tildelte CPR-nummer i "**Patient Data**". Klik på "**Søg**".

Opret patienten, hvis denne ikke fremkommer automatisk.



Bemærk felternes rammefarver: Grøn er korrekt indtastede data. Rød er fejlbehæftede eller mangler data.



Klik på "**Listevisning**" ved modul Laboratoriemedicin, eller klinisk biokemi



Klik på "**JA**" i dialogboksen med ugyldigt CPR-nummer.

2. Bestilling af analyser til WebQuality

REKVISITION: LABORATORIEMEDICIN

Udfør Gem Hotel Nulstil Oplysninger Advis

SØG: Angiv søgeord

KLINISK BIOKEMI

WEBQUALITY

C-reaktivt protein [CRP] (PN);P

Glukose (PN);P

Hæmoglobin (PN);B

INR (PN);P(kB)

KLINISK MIKROBIOLOGI

PATOLOGI

EGNE ANALYSER

WEB PATIENT

Udfør Skema-visning Gem Hotel Nulstil

Support Ny rekvisition Import KKA profiler Opret/rediger profiler Udtræk profiler

REKVISITIONSOPLYSNINGER

INFORMATIONER / SPØRGSMÅL:

Nedenstående spørgsmål markeret med skal besvares

Nedenstående spørgsmål markeret med kan besvares

Angiv kopisvarmodtager PLO

Hæmoglobin (PN);B Analyseresultat (talværdi)

Hæmoglobin apparaturtype;B Anvendt apparatur ABX Mic CRP

Rekvisitjonskommentar (320 af 320) tegn tilbage

Information til prøvetager (320 af 320) tegn tilbage

Annuller OK



Klik på **"WebQuality"** kataloget og vælg den/de analyser, som skal kontrolleres.



Klik på **"Oplysninger"** i funktionsbjælken for at besvare promptspørgsmål.
Klik på **"Ok"** for at forlade oplysninger.

Bemærk: ved nogle promptspørgsmål husker WebQuality det sidst indtastede svar.
WebQuality bestiller automatisk de tilsvarende analyser inde på laboratoriet.



Klik på **"Udfør"** for at udskrive PrøveTagningsBlanket (PTB)

PrøveTagningsBlanket indeholder de respektive strekkoder og alle nødvendige oplysninger omkring prøvetagningen.

3. Indsendelse af kontrolmateriale

Tag et eller flere ekstra glas til parallelanalysen på en tilfældig patient.

OBS! Anvendes kapillærprøver, så skal der også tages et ekstra glas i den type glas, som laboratoriet anvender til analysen.

Glas mærkes med strejkodeetiketten, der er markeret med rødt og sendes til laboratoriet.

Prøverne er dermed anonymiseret med det fiktive CPR-nummer.

Rekv. nr.: 010158-6006 Navn: Webreq, Kvalitet Rekv. nr.: 102424602126 Rekv. navn: 123456 WebReq test læge Rekv. dato: 28-08-2018 11:26:52	Ydemr: 123456 WebReq test læge Storhaven 12 7100 Vejle Telefon: 75720177	Side: 1 af 1 Rekv. nr.: 102424602126 Initialer: ZE	 010158-6006 Webreq, Kvalitet Rekv. nr.:  102424602126
CPR nr.: 010158-6006 Navn: Webreq, Kvalitet Adresse: Gl. Strandvej 9 By: 2990 Nivå Tlf:	Webreq, Kvalitet 010158-6006 WebReq test læge Prøvetagning: 28-08-2018 11:25:00 Pt. kontaktype: Prøve indsendes Andre oplysninger:		 102424602150 GLC EQA A  VE 010158-6006 PINK3 A

 **DIAGNOSTISKE PRØVER**
Biologisk stof, kategori B

Vejle Sygehus
Laboratoriecentret
Beriderbakken 4
7100 Vejle tlf: 7940 6648

A: Glucose (FN);P(vB). Glukose apparatnr.:P(vB), Glukose apparaturtype:P(vB), Glukose ratio:P(vB), Glukose reagenslotnr.:P(vB)

(A) Glucose (FN);P(vB) Glucose (FN);P(vB) Analyseresultat: 6

(A) Glukose apparatnr.:P(vB) Glukose apparatnr.:P(vB) Anvendt apparaturserienr.: 2345

(A) Glukose apparaturtype:P(vB) Glukose apparaturtype:P(vB) Anvendt apparatur: HemoCue

(A) Glukose reagenslotnr.:P(vB) Glukose reagenslotnr.:P(vB) Lotnr på stix,reagens,cuvette: 13546




102424602150

102424602150
010158-6006

4. Reminder for WebQuality

Laboratorierne kan indsætte en **reminder** i WebReq (rød firkant), om at det er tid for indsendelse af nye kontroller.

Mouseover på **remindere**n viser datoen for sidste indsendelse af kontrol.

 LABORATORIEREKVISITION	Praksis  WebReq (123456) Patient web Web, 010158-600
Laboratorium <u>Hent nyheder fra laboratoriet</u> Holbæk Sygehus Vestsjælland	 HUSK WEBQUALITY, SIDST UDFØRT 21-12-2017
Klinik profiler Vælg	

5. Kontakt os

Du kan altid kontakte os, sådan som det passer dig bedst uanset om du vil ringe eller skrive til os.

Online support

Telefon: 7572 0177

E-mail: webreq.support@smds.com

Mandag - torsdag kl. 8.00-15.00

Fredag kl. 8.00-14.00

Øvrige henvendelser:

SYNLAB Medical Digital Services

Storhaven 12

7100 Vejle

Danmark

Telefon: 7879 7575

Mandag - torsdag kl. 8.00-15.00

Fredag kl. 8.00-14.00

Hjemmeside:

www.smds.dk

Lukkedage

Juleaftensdag, Juledag, 2. juledag

Nytårsaftensdag, Nytårsdag

Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. påskedag

Store bededag

Kristi Himmelfartsdag

Pinsedag, 2. pinsedag